



**BOBO WOBBLY**



アプリを  
ダウンロード




ボタンを押して  
Bluetooth 接続



トレーニングを  
開始

## ユーザーガイド

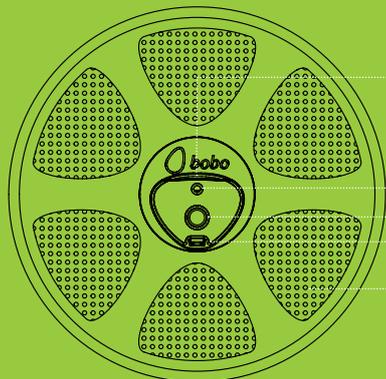

BoBo本体



モーションセンサー内蔵


- LEDインジケータ
- 電源ボタン
- 電池カバー
- トレーニングボード

## さあ、はじめよう！

1

### アプリをダウンロード

**bobo home** アプリを  
スマートフォン/タブレット  
にダウンロードしてください。

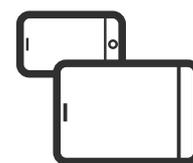

2

### アプリを起動

スマートフォン/タブレットで  
**bobo home**アプリを起動します。



3

### 本体準備


電池カバーから放電防止キャップ  
を引き抜きます。  
(初回のみ)



4

### 電源オン

電源ボタンを短く 1 回押すと  
BoBo本体の電源が入ります。

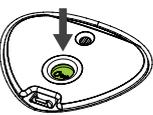

### LEDライトの状態

-  **電源オン** - 青色とオレンジ色点灯
-  **デバイス検索中** - 青色点滅
-  **ペアリング成功** - 緑色点滅
-  **電源オフ** - 電源ボタンを長押し  
したまま赤色点滅を  
2回待つ

### ペアリングは自動的に行われます！



スマートフォン/タブレットでBluetoothを有効にします。ペアリング操作はスマートフォン/タブレットから行わないでください。誤ってスマートフォン/タブレットから操作してしまった場合、スマートフォン/タブレットのBluetooth接続を無効にし、あらためて有効にしてください。

以下の場合、BoBoは自動的に電源が切れます。  
(バッテリー節約のため)

- 2分間ペアリングされなかった時
- 10分間使用しなかった時
- Bluetooth接続が切断された時
- アプリを終了した時

**トレーニングの準備完了！**

# 使用方法

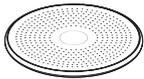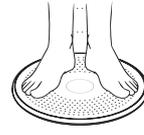- I** BoBoを平らな床の上に置き、トレーニングエリア周囲に物が無いことを確認します。
- II** 片足をボードの片側に置き、ゆっくりと体重をかけます。ボードの端が床につくまで荷重側に傾きます。必要に応じて、支えとなるように壁につかまるなど安定性のあるものを補助として、片足に全荷重をかけます。
- III** もう片足をボードの反対側に置き、両足でボードに乗ります。両足をボード中心から等間隔に乗せるのが目安です。
- IV** 均等にバランスがとれるまで前後へ体重移動を行います。最初はボードに立つだけでも困難に感じるかもしれません。安定性のあるものを補助としてバランスをとることをお勧めします。バランスがとれたら、補助からゆっくりと手を離してください。

## サポートクッション

耐荷重：150 kg

サポートクッションを使用することで、トレーニングの難易度を調整することができます。トレーニングボードの回転や傾斜角度を制限するためバランスを保ちやすくなり、トレーニングをより簡単にします。



- 1** サポートクッションを膨らませます。より膨らませるほどトレーニングボードは安定し、バランスが保ちやすくなります。



- 2** トレーニングエリアに危険なものがないことを確認しサポートクッションを平らな床の上に置きます。



- 3** BoBo本体をサポートクッションの上から中央に置きます。

## トラブルシューティング

### アプリがBoBo本体に接続されない

- bobo homeアプリのみ使用していることを確認してください。
- 本体の電源が入っていることを確認してください。（青色点滅）
- スマートフォン/タブレットのBluetoothが有効であることを確認してください。
- Bluetoothのペアリングは自動的に行われます。ペアリング操作はスマートフォン/タブレットから行わないでください。誤ってスマートフォン/タブレットよりペアリングされている場合、Bluetooth設定から接続済みのBoBoを押して「解除」を選択します。

### アクティベーションプロセスを完了できない


- スマートフォン/タブレットをインターネットに接続する必要があります。インターネットに接続されているかネットワークの状態をご確認ください。

### LEDインジケータが消灯している


- 電源ボタンを短く1回押して、電源を入れてみてください。
- 電池切れの可能性があります。本書「電池交換」の手順に従って、新しい電池に交換してください。

# 電池交換

電池種類 CR-2032

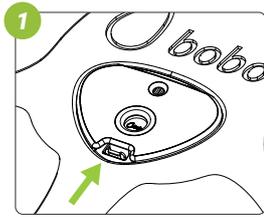

電池カバーを開けます。

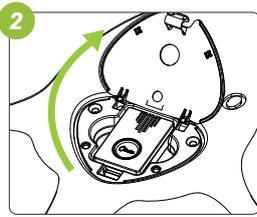


モーションセンサーを取り出してください。



ネジを緩めます。




電池を格納部から引き出します。廃棄は各自自治体の規制に従ってください。

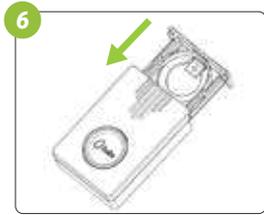


新しい電池を入れます。極性 (+) を確認し、プラス (+) の面を下にして入れてください。




ネジを締めて固定します。

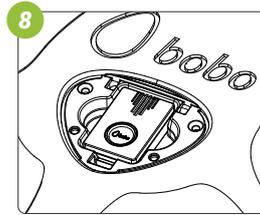

モーションセンサーをBoBo本体へ戻します。

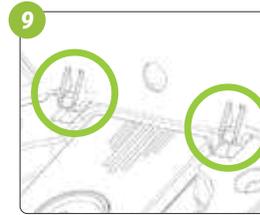

電池カバーを戻す際両方のヒンジがスロットに合っていることを確認してください。

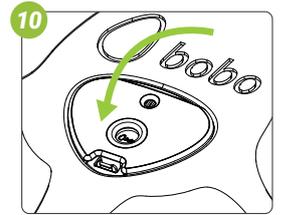

電池カバーをカチッと音がするまで閉じてください。



## 警告！電池の誤飲事故にご注意ください。

本品にはコイン型リチウム電池が含まれています。特にリチウム電池は、飲み込んでからわずか2時間以内に重度の内部火傷を引き起こす可能性があり、場合によっては死に至る危険性があります。新品および使用済み電池は、お子様の手の届かない場所に保管してください。本品の電池カバーがしっかりと閉まらない場合、使用を中止し、お子様の手の届かない場所に保管してください。電池の誤飲、あるいは体内に入ってしまった場合は、直ちに医療機関を受診してください。

## 注意!

ご使用前に必ずお読みください。



必要に応じて安定性のある補助具をご使用ください



水に濡れると滑りやすくなるためご注意ください



ご使用前には周囲に物が無いことをご確認ください



お子様は大人の監督のもとでご使用ください



本取扱説明書を必ずよくお読みください



トレーニングは周囲の人から安全な距離を確保し怪我予防に努めてください

## 保守



本体を落下させないようご注意ください



水との接触を避けてください



分解、改造などは絶対に行わないでください



アルコールや研磨剤を含む液体での拭拭はお止めください

# 使用上の注意

ご使用前に以下の注意事項を必ずご確認ください。

本品の使用により発生した怪我または損害に対しBO&BO社は一際の実責任を負いません。自己責任により本品をご使用ください。

- ご使用前に本品の損傷や変形、部品の不足、その他の欠陥がないかご確認ください。もしも何らかの不具合がある場合は、ご使用をお止めください。
- 本品は必ず十分なスペースのある場所でご使用ください。また、傾斜地や濡れている場所では使用しないでください。
- トレーニング中に咄嗟にトレーニングボードから降りることがあります。周囲に危害を及ぼす可能性のある家具や障害物がないようご注意ください。
- 特に初回のトレーニングにおいて、安全のためご使用中は手が届く範囲に壁や安定したテーブルなどの補助具があることをご確認ください。必要に応じて、トレーニング中も転倒予防のため補助具をご使用ください。
- 本品でのトレーニングは、スニーカーやスポーツシューズの着用、あるいは裸足で行ってください。
- ご使用中にトレーニングボード上で弾んだり跳ねたりしないでください。
- 本品は1人用のバランストレーニング器具です。同時に複数名で使用しないでください。
- トレーニングボードの端に乗ったり、立ったりしないでください。
- 本品を水やその他の液体、極度の高温や低温の環境にさらさないでください。
- 飲酒後など知覚平衡感覚に影響を及ぼす状態の方は本品を使用しないでください。転倒、転落の危険性があります。
- お子様、認知症の方または精神的認知的な要因が影響する方などは、安全のため必ず大人の監督下でご使用ください。本品やその他の所有物の故障や損傷、怪我等の危険性があります。
- トレーニングは周囲の人から安全な距離を確保し怪我予防に努めてください。
- 本品の改造、分解、粉碎は絶対に行わないでください。電池交換の目的以外で電池カバーを開放しないでください。
- 本品には可燃性のコイン型リチウム電池が含まれています。火気、オープン、電子レンジなどの熱源に近づけないでください。
- 電池から液漏れがある場合は、直ちに使用を中止しカスタマーサポートへご連絡ください。
- コイン型リチウム電池の充電は絶対にお止めください。電池電解液の沸騰、内圧上昇、液漏れ、発熱、破裂、発火などの危険性があります。
- 本品を濡らさないでください。感電の原因となるため、多湿の環境や濡れた手での使用はお止めください。



株式会社エントリージャパン

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 5-63-4 神園パークプレイス  
TEL : 03-6407-8686 FAX : 03-6407-8687  
info@entry-japan.com <http://www.entry-japan.com>



BO10001-2-ws\_221111